




[Головна](#) | [Каталог](#) | [Діагностичне обладнання](#) | [Авто Реф/Кератометри](#) |

POTEC PRK-8000

Автоматичний рефрактокератометр POTEC PRK-8000


Даний прилад підтримує різні виміри основних параметрів очі. При використанні даного приладу можливо зробити вимір рефрактометрії, кератометрії, діаметра рогівки, базової кривизни контактної лінзи, периферичної кривизни рогівки, межзрачкового відстань. Таким чином, вимір рефракції ока і підбір коригуючих окулярів або контактних лінз за показаннями даного приладу, можуть бути зроблені точно і ефективно.

Широкий діапазон виміру діоптрійності

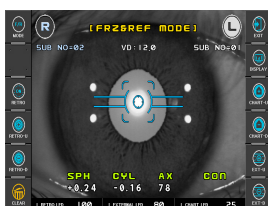


Оскільки PRK-8000 охоплює широкий діапазон вимірювань, від -30D до +25D, навіть пацієнти з високими ступенями відхилення рефракції можуть бути обстежені на даному приладі.

Точне вимірювання

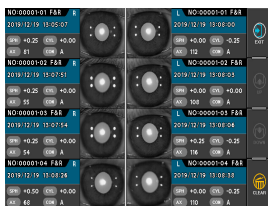

Ви можете виміряти показники точно тому, що туманний метод фіксації мішені робить вимір точним і швидким.


Збереження зображення

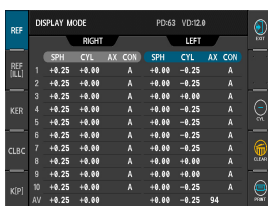

Зображення, отримані при вимірюванні в режимі ретроілюмінації (Режим ILLUM) зберігаються на комп'ютері, через USB-порт.


*Спеціальний додаток для ПК і драйвери USB передбачені

Напівавтоматичний захоплення очі

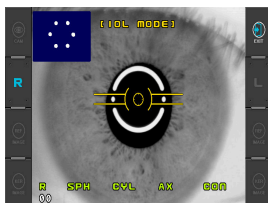

В даному приладі передбачена функція напівавтоматичного захоплення очі. Ця функція дозволяє визначити положення зіниці пацієнта і автоматично регулює висоту положення приладу.

Легке з'єднання з іншим обладнанням

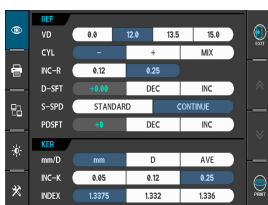

Цей прилад оснащений портом для підключення іншого обладнання за допомогою RS-232 або USB - порт.

Зовнішній монітор VGA дисплей

Ви можете підключити монітор VGA для зовнішнього дисплея.

Зручні функції експлуатації



Ви можете легко керувати приладом за допомогою сенсорного екрану.

Режим економічного друку

Розмір чека з результатами обстеження і розташування показань, в залежності від режиму друку, можуть бути скориговані, з можливістю збереження зображення.

Ай Пі Медікал

+38 (067) 718 49 06

+38 (095) 863 49 55

+38 (057) 750 88 14

Сайт створено студією КОДА, 2014 р.