



Лампа щілинна
S360/S360S



Оптична система високої чіткості

Оптична роздільна здатність становить до 200 lp/mm (2700·N lp/mm), що дозволяє проводити точну діагностику, безпечно лікувати пацієнтів та отримувати приголомшливі результати візуалізації.



Світлодіодне освітлення


Світло світлодіодної лампи MediWorks дуже схоже на світло галогенної лампи, що відповідає вимогам для роботи лікарів. Ця лампа має низьку колірну температуру та високу інтенсивність освітлення, завдяки чому зображення сітківки ока без відблисків стає набагато яскравішим, а зображення рогівки з нервами краще виринає. Світлодіодна лампа має довший термін служби та споживає менше енергії.



Збільшення і жовтий фільтр

В щілинних лампах MediWorks використовуються обертовий барабан для перемикавання між різними значеннями збільшення. S360 пропонує 5 збільшень (6,3X, 10X, 16X, 25X, 40X), а S360S пропонує 3 збільшення (10X, 16X, 25X).

Також є вбудований жовтий фільтр. Разом з кобальтово-синім фільтром вони збільшують контрастність зображення при забарвленні натрієвим флуоресцеїном.

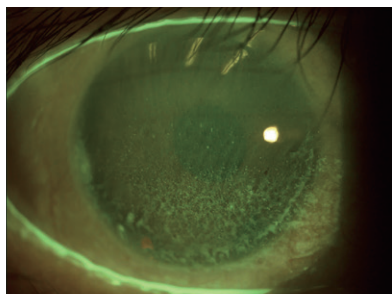

Увага до деталей

Компанія MediWorks приділяє велику увагу кожній деталі конструкції щілинних ламп, щоб забезпечити зручність роботи. Лікарі можуть управляти ручкою освітлення одним пальцем, під час керування джойстиком.

Модуль для створення фото\відео

Модернізувати S360/S360s до цифрової щілинної лампи можливо за допомогою модуля Firefly (Цифрова камера Firefly, дільник променя, програмне забезпечення MediView, USB-кабель, модуль фонового освітлення)



Цифрова камера Firefly
+ дільник променя



Програмне
забезпечення
MediView



USB-кабель



Модуль
фонового
освітлення

Додаткові аксесуари



Металева пластина
(установка на робоче
місце офтальмолога)



Вимірювальний
окуляр



Монокуляр
асистента

Технічні характеристики

МІКРОСКОП	S360		S360S
Тип мікроскопа	Тип Галілея		
Збільшення	5-и ступеневе, ротаційне		3-и ступеневе, ротаційне
Загальне збільшення	6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X		10X, 16X, 25X
	2700·N lp/mm (200 lp/mm)		
Окуляри	12.5X		
Кут між окулярами	10°		
Міжзнічна відстань	52мм-80мм		
Оптична сила окулярів	-8Д - +8Д		
Поле огляду	Ø36.2мм、 Ø22.3мм、 Ø14мм、 Ø8.9мм、 Ø5.7мм		Ø22.3мм、 Ø14мм、 Ø8.9мм
Система освітлення			
Ширина щілини	0~14 мм, яка не переривається (щілина стає колом при 14 мм)		
Висота щілини	1~14 мм, яка не переривається		
Діаметр апертури	Ø14мм, Ø10мм, Ø5мм, Ø3мм, Ø2мм, Ø1мм, Ø0.2мм		
Кут щілини	0°~180°		
Фільтри	теплопоглинальний, нейтральний, “без червоний”, кобальтовий синій, жовтий.		
Нахил щілини	5°, 10°, 15°, 20°		
Освітлювальна лампа	Світлодіод		
Яскравість	≥150клк		
Блок живлення			
Вхідна напруга	~100В~240В		
Вхідна частота	50Гц/60Гц		
Номинальний струм	1.2А		
Вихідна напруга	Світлодіод 3В, точка фіксації 15В		
Пакування			
Розміри	740мм x 450мм x 530м(Д/Ш/В)		
Бруто	23 кг		
Нетто	17 кг		



Shanghai MediWorks Precision Instruments Co.,Ltd.

Но.7, МінгПу Пхасе II, Но. 3279 СанЛу Род, МінХанг Дістрікт 201100 Шанхай Китайська Народна Республіка

Тел: +86-21-54260421 54260423 Fax: +86-21-54260425

Email: marketing@mediworks.biz

international@mediworks.biz

Follow us



www.mediworks.biz

202103 *Subject to change in design or specification without advance notification

Details Make the Difference