


POTEC

Зробіть своїми розумні технології




PLC-8000 PLC-8000pola

Система Smart Chart із РК-дисплеєм Full HD

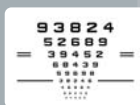

PLC-8000 PLC-8000pola

Система Smart Chart із РК-дисплеєм Full HD

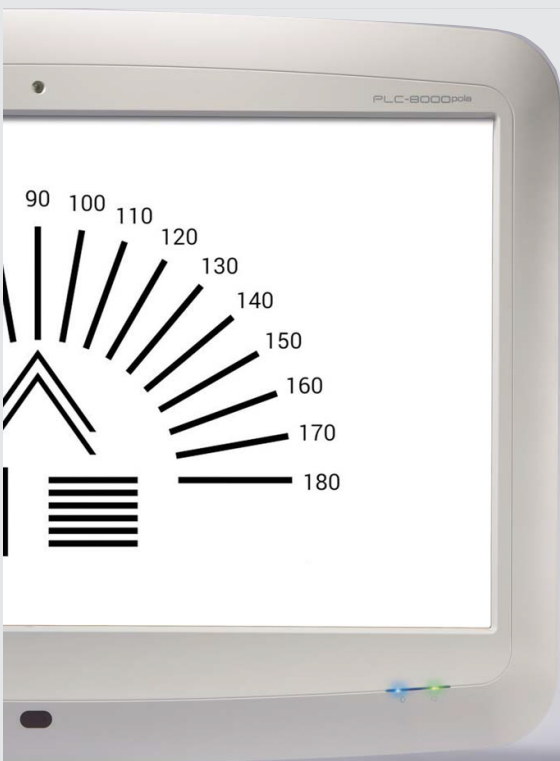

ЗРУЧНІСТЬ

- **Система Smart Chart із РК-дисплеєм Full HD**
 - Діаграма високої роздільної здатності 23 (звичайний), 24 дюйми (Polaroid).
 - Full-HD TFT-LCD (1980X1080) панель / 16.7М Кольоровий 250cd/m²
- **Широкий спектр тесту**

РК-дисплей високої роздільної здатності забезпечує широкий діапазон тесту 0,05 ~ 2,0
- **Регульована тестова відстань**

Тестова відстань регулюється 1,0 м ~ 6,0 м крок 0,1 м
- **Інтеркомунікація SMART**

Підтримка обох інтерфейсів RS-232 (дротовий), Bluetooth (бездротовий) для сумісності з PDR-7000.
- **Базовий тест / Модифікована користувачем програма**

Передбачена базова програма А та програма В, яка передбачає програмування до 40 кроків.
- **Покращене налаштування фільтра R/G**

Широкий діапазон регулювання R/G до 96 кроків дозволяє оптометристу оптимізувати екран, щоб добре відповідати навколишньому середовищу для надійного тестування бінокулярного зору.
- **Відтворення рекламних відео**

У режимі енергозбереження підсвічування РК-дисплея вимикається, щоб мінімізувати енергоспоживання, а рекламні відео для клінік і магазинів оптики відтворюються на дисплеї.
- **Зручні функції**

Контраст, Дзеркало, Маска.
- **Завантажувальний екран, що настроюється, і слайди**

(до 38 слайдів)

Система Smart Chart із РК-дисплеєм Full HD PLC-8000, PLC-8000pola



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відстань тестування	1.0~6.0 м (0,1 крок налаштування)
Таблиці та діаграми	Кільце Ландольта, Алфавіт, Цифри, Снеллен, Картинки, Маска (Вертикальна, Горизонтальна, Одна літера), (RG червоний-зелений, Поляризація для PLC-8000pola) Діаграми Ісіхари (рівень кольороаномалії), Діаграма Амслера
Програми	До 40 графіків
Зовнішній порт	USB(USB 2.0), RS-232
З'єднання	Дротове : RS-232 Бездротове : Bluetooth
LCD-екран	23-дюймовий Full-HD (1920 x 1080 пікселей)PLC-8000 24-дюймовий Full-HD (1920 x 1080 пікселей)PLC-8000pola
Операційна система	Android 4.4.2
Карта пам'яті	Карта пам'яті Micro SD 8Gb
Динамік	1,5Вт
Відео формат	AVI, MPEG, MP4, MKV
Живлення	АС100-240 В, 50/60 Гц
Енергоспоживання	PLC-8000: 45-55 ВА PLC-8000pola: 35-45 ВА
Габаритні розміри	Корпус: 583(Ш)х55(Г)х423(В) мм Пульт дистанційного керування : 64(Ш)х196(Г)х20(В) мм
Вага	Корпус: приблизно 6 кг Кронштейн для настінного кріплення: 370 г Пульт дистанційного керування: 160 г (з батарейками)
Умови навколишнього середовища	(У використанні) Температура: +10 ~ +40 Вологість: 30%RH ~ 85%RH Тиск: 700hPA ~ 1060hPA
	(При транспортуванні / зберіганні) Температура: -10 ~ +55 Вологість: 10%RH ~ 90%RH Тиск: 600hPA ~ 1060hPA

Уповноважений представник в Україні

ТОВ «АЙ ПІ МЕДІКАЛ»

Адреса: в'їзд Мовчанівський, б. 3 оф. 1, м. Харків, 61001, Україна

Телефон: +38 067 718 4906

E-mail: office@ipmedical.com.ua

Сайт: www.ipmedical.com.ua

Виробник:

ПОТЕК КО., Лтд, 40-4, Текно 2-ро, Юсеонг-гу, Теджон, 34015,

Республіка Корея

POTEC

