



sonartajans.com



ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRT. PAZ. İTH.İHR. TİC. VE SAN. A.Ş.
1.Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım 5.Cad. No:10 58060 SİVAS - TÜRKİYE
Tel: +90 (346) 218 14 18 (pbx) Fax: +90 (346) 218 14 20
www.anadolutip.com.tr info@anadolutip.com.tr

ТОВ «АЙ ПІ МЕДІКАЛ»
61001 Харків, в'їзд Мовчанівський 3, оф.1
+38(095)863-49-55
www.ipmedical.com office@ipmedical.com.ua

Преміум-лінзи
Сучасний виробничий процес та
унікальна гідрофобна сировина.



PRELOADED

Попередньо завантажена інтраокулярна лінза

Попередньо завантажена система доставки IOL від Zaracomm — це нова проста у використанні система інжектора інтраокулярних лінз із попередньо завантаженою нашою добре відомою гідрофобною інтраокулярною лінзою (IOL). Ця система призначена для безпечної та точної імплантації ІОЛ в око людини під час операції з видалення катаракти.

Ця лінза має ергономічно розроблена з безпечними, ефективними та надійними функціями керування. Вона також виключає помилки при завантаженні ІОЛ, оскільки не торкається неї.

Основні характеристики та переваги

- Зручний у використанні
- Гідрофобний акрил (сополімер акрилату та метакрилату), що фільтрує УФ
- 2,2 мм MICS

Назва моделі	AS60125P/AS60130P
Дизайн лінзи	цільна частина для заднього капсульного мішка
Матеріал	Гідрофобний акрил (сополімер акрилату та метакрилату) фільтрує УФ
Діаметр оптики	6,0 мм
Загальна довжина	12,50 / 13,00 мм
Кут гаптики	0°
Оптичний дизайн	Двоопуклий квадратний край оптичний і гаптичний
Сила	від +5D до 30D з кроком 0.5D
Коефіцієнт заломлення	1,51
Сферична аберация	Конструкція без аберації
Вміст води	<1 %
Стерилізація	ЕЮ
Розрахункова А - Константа	118,4
ACD	5,2
Тип системи доставки	Одноразова, повністю попередньо завантажена ІОЛ з системою ін'єкції
Розмір розрізу	2,2 мм
Термін придатності	5 років



ASPHERIC


Асферична інтраокулярна лінза

У поєднанні з 100% гідрофобним матеріалом та унікальним процесом виробництва, асортимент інтраокулярних лінз Zaracomm Lenses надає хірургам можливість вибору високоякісної оптики, яка не створює відблисків та забезпечує кращу гостроту зору. Матеріал та дизайн лінз забезпечують контрольоване розгортання лінз при кімнатній температурі та чудову центризацію для капсульних мішків різних розмірів.

Основні характеристики та переваги

- Високоякісний 100% гідрофобний матеріал з перевіреною на ринку конструкцією ІОЛ.
- Оптика без аберацій забезпечує велику глибину різкості, не викликає аберацій вищого порядку при оптичному або анатомічному зміщенні і є безпечним та надійним варіантом для хірурга, оскільки конструкція не залежить від будь-яких доопераційних аберацій роївки у пацієнтів.
- Цільнокомпонентна модифікована L-подібна, некутова гаптична конструкція для відмінного центрування в капсульних мішках різних розмірів.
- 360-градусний дизайн з квадратними краями для зниження частоти позовжнього заломлення лінзи.
- Плавне введення та контрольоване розгортання лінзи при кімнатній температурі.
- Оптимальний показник заломлення забезпечує мінімальне відблиски і ореоли, тим самим забезпечуючи кращий контраст і гостроту зору.

моделі	AS60125/AS60130
Дизайн	Асферична цільна частина для заднього капсульного мішка
Матеріал	Гідрофобний акрил (сополімер акрилату та метакрилату), фільтрує УФ
Діаметр оптики	6,0 мм
Загальна довжина	12,50 / 13,00 мм
Кут гаптики	0°
Оптичний дизайн	Двоопукла 360° квадратний край, оптична і гаптичний
Сила	від 0D до 40D з кроком 0.5D
Коефіцієнт заломлення	1,51
Сферична аберация	Конструкція без аберації
Вміст води	<1 %
Стерилізація	ЕЮ
Розрахункова А - Константа	118,4
ACD	5,2
Тип системи доставки	Зручний у використанні тримач для ІОЛ
Розмір розрізу	2,2 мм
Термін придатності	5 років

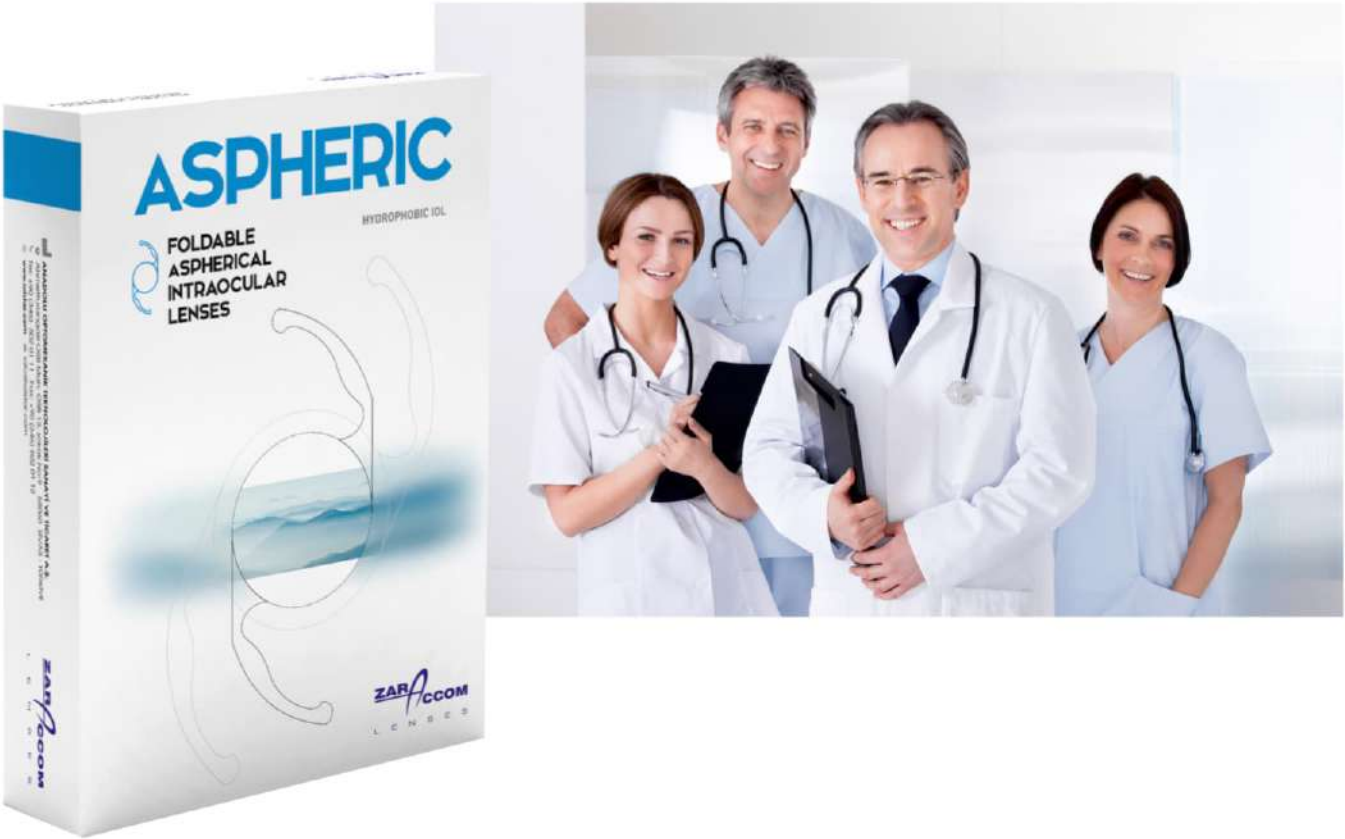

SPHERIC


Сферична інтраокулярна лінза

У поєднанні з 100% гідрофобним матеріалом та унікальним виробничим процесом, асортимент інтраокулярних лінз Zaracomm Lenses надає хірургам можливість вибору високоякісної оптики, яка не створює відблисків та забезпечує кращу гостроту зору. Матеріал та дизайн лінз забезпечують контрольоване розгортання лінз при кімнатній температурі та чудову центрizaцію для капсульних мішків різних розмірів.

Основні характеристики та переваги

- Високоякісний 100% гідрофобний матеріал з перевіреною на ринку конструкцією ІОЛ.
- Економічно ефективний
- Цільнокомпонентна модифікована L-подібна, некутова гаптична конструкція для відмінного центрування в капсульних мішках різних розмірів.
- 360-градусний дизайн з квадратними краями для зниження частоти поздовжнього заломлення лінзи.
- Плавне введення та контрольоване розгортання лінзи при кімнатній температурі.
- Оптимальний показник заломлення забезпечує мінімальне відблиски і ореоли, тим самим забезпечуючи кращий контраст і гостроту зору.

Назва моделі	UF60125/UF60130/F-260
Дизайн лінзи	Цільний елемент для задньої капсульної сумки
Матеріал	Гідрофобний акрил (сополімер акрилату та метакрилату), фільтрує УФ
Діаметр оптики	6,0 мм
Загальна довжина	12,50 / 13,00 мм
Кут гаптики	0°
Оптичний дизайн	Двоопукла 360° квадратний край оптична і гаптичний
Сила	від 0D до 40D з кроком 0.5D
Коефіцієнт заломлення	1,51
Вміст води	<1 %
Стерилізація	EtO
Розрахункова А - Константа	118,4
ACD	5,2
Тип системи доставки	Зручний у використанні тримач для ІОЛ
Розмір розрізу	2,2 мм -2,4 мм
Термін придатності	5 років

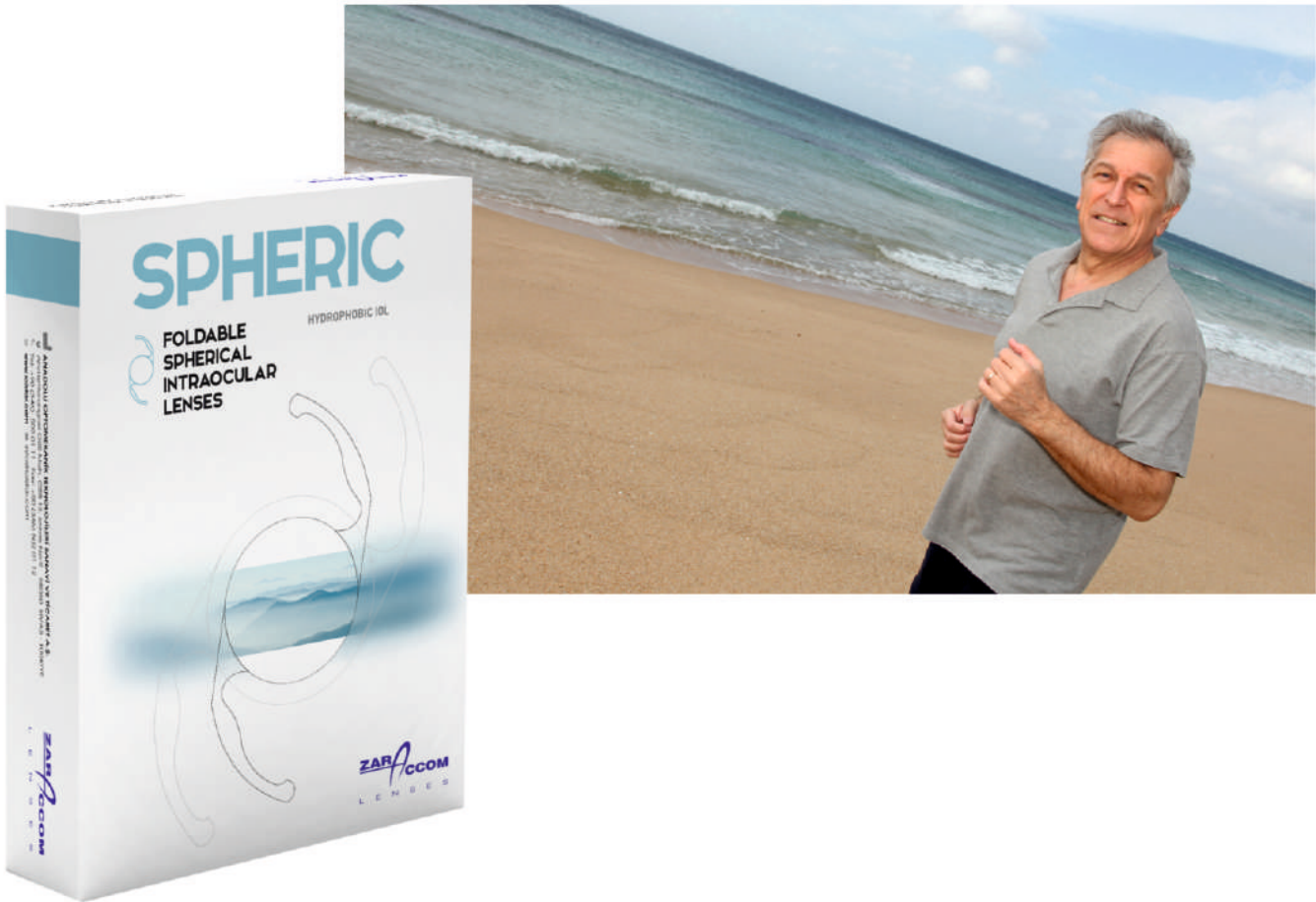

MULTIFOCAL

Мультифокальна інтраокулярна лінза

Асиметричний розподіл світла, що використовується в мультифокальних інтраокулярних лінзах Zaracomm, забезпечує оптимальну якість зору на всіх відстанях, а конструкція, незалежна від розміру зіниці, додатково забезпечує хороший зір в умовах слабкого освітлення. Забезпечте своїм пацієнтам чудову якість зору на близькій та далекій відстані.

Мультифокальні інтраокулярні лінзи Zaracomm представляють передову мультифокальну технологію, що дозволяє пацієнтам чітко бачити без окулярів на близькій і далекій відстані. Платформа пропонує оптимізовану оптичну конструкцію для відмінного зорового результату і високого ступеня незалежності від окулярів, включаючи відстань для читання. Пацієнти, які лікуються мультифокальними інтраокулярними лінзами Zaracomm, насолоджуються високою незалежністю від окулярів, що призводить до кращої якості життя.

Основні характеристики та переваги

- Світло розподіляється асиметрично між різними фокусними точками, щоб забезпечити відмінний зір на всіх відстанях. 65% світла розподіляється на далеку фокусну точку, а 35% — на ближню.
- Незалежність від розміру зіниці завдяки високопродуктивній дифракційно-рефракційній мікроструктурі, що покриває 5,0 мм оптичного діаметра.
- Завдяки асиметричному розподілу світла між далекою (65%) і близькою (35%) фокусною точкою, світловіддача досягає 80%, що покращує загальну контрастну чутливість.
- 2,2 мм MICS

Назва моделі	A100
Дизайн лінзи	Дифракційна цільна частина для заднього капсульного мішка
Матеріал	Гідрофобний акрил (сополімер акрилату та метакрилату), фільтрує УФ
Діаметр оптики	6,0 мм
Загальна довжина	12,50
Кут гаптики	0°
Оптичний дизайн	Плоско-опуклий квадратний край оптичний і гаптичний
Сила	від 10D до 25D з кроком 0.5D
Сила в близькості	+4,00 площина ІОЛ (+3,50 площина окулярів)
Коефіцієнт заломлення	1,51
Вміст води	<1 %
Стерилізація	EtO
Розрахункова А - Константа	117,0
ACD	19
Тип системи доставки	Зручний у використанні тримач для ІОЛ
Розмір розрізу	< 2,2 мм
Термін придатності	5 років



Напівзакінченаінтраокулярна лінза

своє виробництво з трьома різними варіантами широкого асортименту

IOL Bulk

Готовий асферичний оптичний та гаптичний дизайн
Можливе виготовлення оптичного та гаптичного дизайну на замовлення
Фіксована товщина гаптичного покриття становить 0,3 мм, товщина гаптичного покриття на замовлення можлива за запитом.
Відправте чисту воду в ПП-пляшках як сипучий товар

IOL Pack

Готовий асферичний оптичний та гаптичний дизайн
Можливе виготовлення оптичного та гаптичного дизайну на замовлення
Фіксована товщина гаптичного покриття становить 0,3 мм, товщина на замовлення можлива за запитом
Відправляється в стерильній упаковці в нестерильному вигляді, готовий до стерилізації
За запитом можливе нанесення власного маркування та штрих-коду

IOL Made

Готовий асферичний оптичний та гаптичного дизайн
Можливе виготовлення оптичного та гаптичного дизайну на замовлення
Фіксована товщина гаптичного покриття становить 0,3 мм, товщина на замовлення можлива за запитом
Відправляється в стерильних умовах у стерильній упаковці
За запитом можливе нанесення власного маркування та штрих-коду

Етапи операції	Bulk	Semi- Finished	Finished
Оптична поверхня - задня	S	S	S
Оптична поверхня - передня	S	S	S
Гаптичне фрезерування	S	S	S
Деблокування	S	S	S
Хімічна екстракція	S	S	S
Контроль якості	C	S	S
Вимірювання	C	S	S
Штрих-кодуювання	C	S	S
Внутрішній стерильний пакет	C	S	S
Стерилізація ефірним олією	C	C	S
Зовнішня упаковка	C	C	C

S: Операції з постачальниками C: Операції з клієнтами

Надихайтесь
променями
світла

